

# Trokarer


Truly customised laparoscopic solutions



Et omfattende sortiment af ergonomisk designede trokarer, som giver enkel og sikker adgang til bughulen.

- Gennemsigtigt, riflet port til instrumentvisualisering og effektiv fastholdelse i bugvæggen
- Universalmembran, der passer til 5-12 mm instrumenter\* samtidig med at pneumoperitoneum bevares


\* Til trokar med diameter på 12 mm.

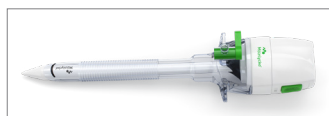

Ikke-skærende trokar med dilaterende spids




Optisk trokar

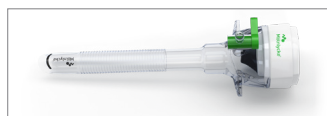


Universel port



Port til optisk ballontrokar

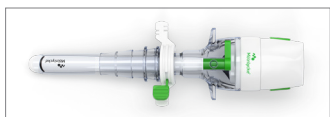

Hasson trokar

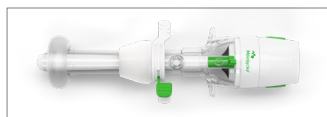

Hasson ballontrokar



Dobbeltpakgede trokarer

## Ikke-skærende trokar

Designet til at separere snarere end at lacerere væv, hvilket nedsætter brist af fascien sammenlignet med trokarer med blad. Dette giver mindre behov for fascielukning.

## Optisk trokar

Optisk trokar tillader direkte visualisering af lagene i bugvæggen, når trokaren indføres. Herved reduceres risikoen for trokarrelaterede skader især i forbindelse med den primære anlæggelse af port.

- Giver sikker indføring i bugvæggen

## Hasson trokar

Hasson-trokarer er udviklet til kirurger, som foretrækker sikkerheden ved den åbne teknik til den primære anlæggelse af port.

- Design med stump spids forhindrer utilsigtet beskadigelse af de indre organer under indføring
- Portens dybde kan hurtigt justeres ved hjælp af den enkle og effektive fikseringsanordning

## Universelle porte

Kompatible med alle obturatorer af samme størrelse (afskærmede med blad, uden blad, optisk) hvilket gør det nemmere at bestille, opbevare og lave besparelser.

## Porte til optisk ballontrokarer

Kompatible med alle obturatorer af samme størrelse (ballontrokar, optisk) hvilket gør det nemmere at bestille, opbevare og lave besparelser.

## Ballonfikserede trokarer

- Reducerer den del af porten, som er inde i abdomen, samtidig med at pneumoperitoneum bevares

## Dobbeltpakgede trokarer

Trokar med ekstra universel porte i én pakke giver reduktion i lagerførte varenumre.

Varenr.	Dobbelt-pakn.	Beskrivelse	Str.	Længde	Stk./inder
899308	-	Ikke-skærende trokar, dilat.	5mm	70mm	5
899309	-	Ikke-skærende trokar, dilat.	5mm	100mm	5
899310	-	Ikke-skærende trokar, dilat.	11mm	100mm	5
899311	-	Ikke-skærende trokar, dilat.	11mm	150mm	5
899312	-	Ikke-skærende trokar, dilat.	12mm	100mm	5
899313	-	Ikke-skærende trokar, dilat.	12mm	150mm	5
899336	-	Ikke-skærende trokar, dilat.	15mm	100mm	5
899316	899343	Optisk trokar	5mm	70mm	5
899317	899344	Optisk trokar	5mm	100mm	5
899324	899347	Optisk trokar	5mm	150mm	5
899318	899345	Optisk trokar	11mm	100mm	5
899319	899346	Optisk trokar	12mm	100mm	5
899326	899349	Optisk trokar	12mm	150mm	5
899320	-	Universel port	5mm	70mm	5
899321	-	Universel port	5mm	100mm	5
899322	-	Universel port	11mm	100mm	5
899323	-	Universel port	12mm	100mm	5
899306	-	Hasson trokar	11mm	100mm	5
899307	-	Hasson trokar	12mm	100mm	5
899330	-	Optisk ballontrokar	5mm	70mm	5
899327	-	Optisk ballontrokar	5mm	100mm	5
899331	-	Optisk ballontrokar	11mm	100mm	5
899328	-	Optisk ballontrokar	12mm	100mm	5
899332	-	Port til optisk ballontrokar	5mm	70mm	5
899233	-	Port til optisk ballontrokar	5mm	100mm	5
899334	-	Port til optisk ballontrokar	11mm	100mm	5
899335	-	Port til optisk ballontrokar	12mm	100mm	5
899329	-	Hasson ballontrokar	12mm	100mm	5

Alle trokarer og porte leveres både sterilt, enkeltpakket og i Mölnlycke procedurepakker.

Lovlig producent: Unimax Medical Systems Inc.  
 Importeret og distribueret af: Mölnlycke Health Care AB

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
 Mölnlycke varemærke, navn og logo er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen  
 © 2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0382310